



air-free
PATIENT WARMING

CATALOGO PRODOTTI





WC71 - Uscita Singola Centralina Controllo Temperatura

DIMENSIONI

(21.0cm W x 29.0cm H x 18.0cm D)

PESO

(2.9 kg)

- Touchscreen 7" con interfaccia utente intuitiva
- Controlla UNA sola coperta riscaldante
- Monitoraggio della Temperatura* Presentazione
- di diapositive integrate
- Guide di posizionamento
- Include morsetto per asta porta-flebo
- Compatibile con montaggio VESA (75mm)
- Autotest integrato



WC77 - Multiporta Centralina Controllo Temperatura

DIMENSIONI

(21.0cm W x 29.0cm H x 18.0cm D)

PESO

(3.2 kg)

- Touchscreen da 7" con interfaccia utente intuitiva
- controlla fino a 4 coperte riscaldanti e un materasso riscaldante
- Monitoraggio temperatura*
- Presentazione diapositive integrato
- Guide di posizionamento
- Include morsetto per asta portaflebo
- compatibile con montaggio VESA
- Autotest integrato




retro WC77

Il controller multiporta WC77 offre la massima versatilità ed efficienza per la gestione della temperatura del paziente.

Caratteristiche Centralina


Presentazioni di formazione integrate

Le centraline includono presentazioni educative per aiutarti ad apprendere le pratiche migliori (BEST)

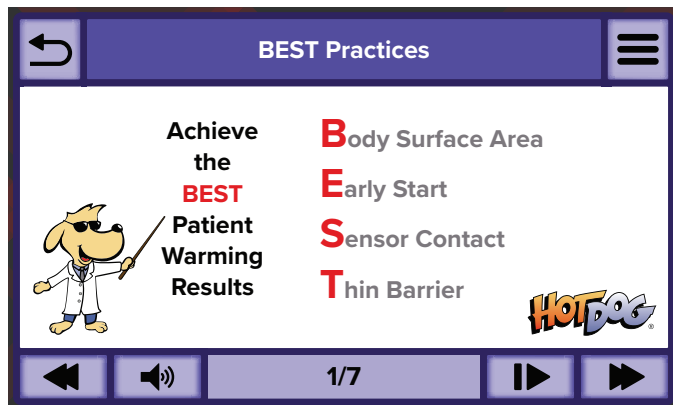


Monitoraggio della Temperatura & Modalità Automatica*

Il monitoraggio della temperatura utilizza la temperatura del paziente per controllare automaticamente i dispositivi di riscaldamento.

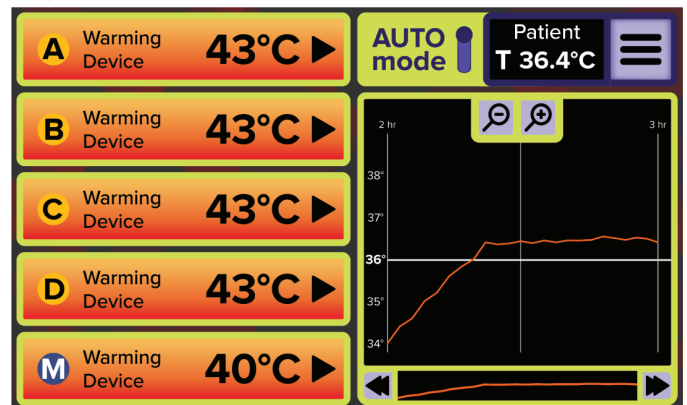


Controllo Avanzato della Temperatura

Controlla tutti i dispositivi di riscaldamento singolarmente con incrementi di 1°C o insieme al touchscreen.

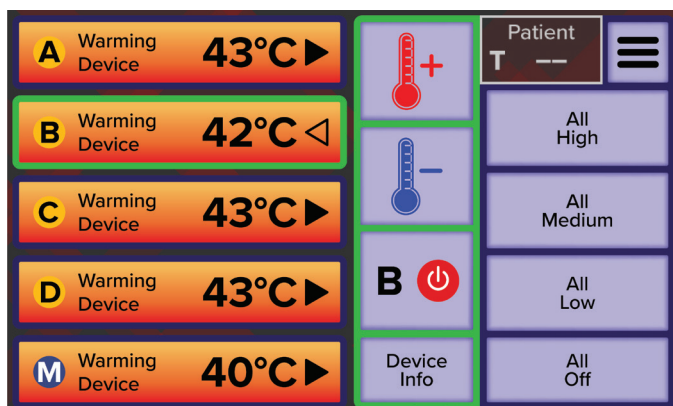

Guide di Posizionamento

Include guide visive della coperta per varie posizioni chirurgiche per semplificare la configurazione per i nuovi utenti.

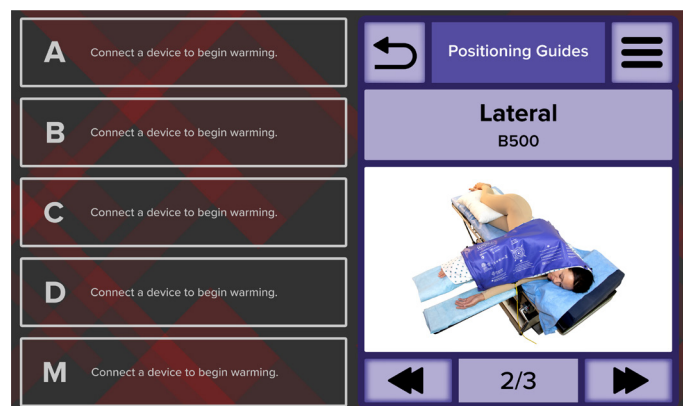

Le centraline "intelligenti" forniscono elettricità a bassa tensione a coperte e materassi che viene convertita in calore sicuro dal brevettato tessuto polimerico semiconduttivo e gestito da un avanzato sistema di sensori.

Le unità hanno garanzia di 3 anni.

**La funzione di monitoraggio della temperatura è marcata CE e in attesa di autorizzazione FDA.*

Coperte Riscaldanti

B500

Coperta Riscaldante Universale

DIMENSIONI

(43.2 cm W x 76.2 cm L)


PESO

(0.8 kg)



Le coperte riscaldanti HotDog sono leggere, flessibili e progettate per soddisfare tutte le esigenze di riscaldamento. Il guscio esterno è un morbido uretano non poroso incorporato con un agente antimicrobico che impedisce la crescita di microrganismi, progettato per una facile pulizia. Il tessuto semiconduttivo produce una resa termica uniforme su tutta la superficie della coperta. La temperatura è controllata da 37-43°C. Le coperte hanno una garanzia di 2 anni e una scadenza di 30 mesi.

HotDog può aiutare a mantenere la normotermia per i pazienti di tutte le età. Vedere pagina 6 per la nostra offerta di prodotti pediatrici.

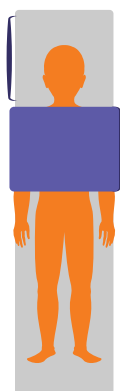

1 B500




1 B500



2 B500s



2 B500s
(ripiegata)

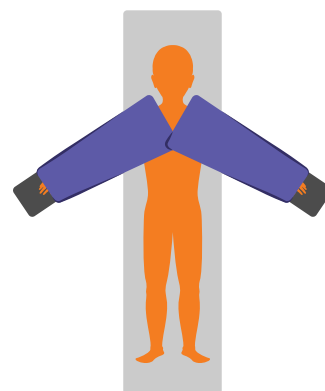

2 B500s

La B500 è la coperta riscaldante più avanzata e versatile. Ha bordi arrotondati per un tocco più morbido e bordi modellabili per mantenere la forma. Include anche un tessuto riscaldante più flessibile per una migliore drappeggiabilità ed efficacia.

Coperte Riscaldanti

B103

Coperta Riscaldante per la parte inferiore del corpo

DIMENSIONI

(74.9 cm W x 98.4 cm L)

PESO

(1.36 kg)



B104

Coperta Riscaldante per corpo intero

DIMENSIONI

(74.3 cm W x 128.6 cm L)

PESO

(1.81 kg)



B105


Coperta riscaldante multiposizione (due pannelli collegati)

DIMENSIONI (x2 Pannelli)

(50.8 cm W x 90.63 cm L)

3.2 lb

(1.45 kg)

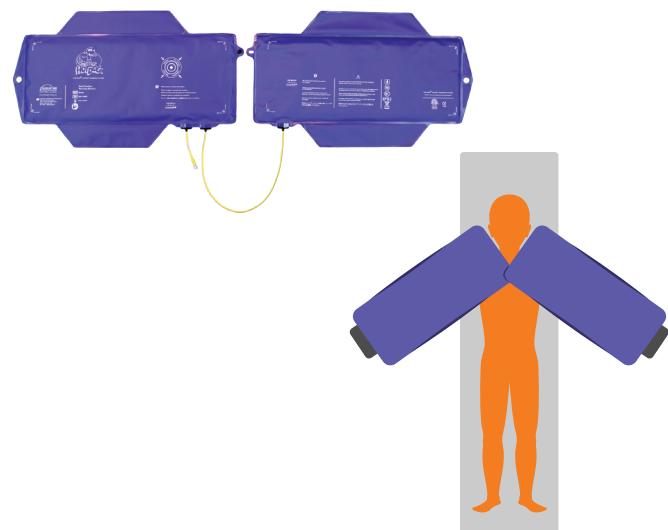

B107

Coperta Scaldatesta

DIMENSIONI

(19.7 cm W x 70.5 cm L)

PESO

(0.54 kg)



Materassini Riscaldanti

U101

Materasso Riscaldante Sottoscocca, 82cm

DIMENSIONI

(49.53 cm W x 81.28 cm L)

PESO

(0.9 kg)



U102

Materasso Riscaldante Sottoscocca, 127cm

DIMENSIONI

(49.53 cm W x 127 cm L)

PESO

(1.5 kg)



U300

Materassino Riscaldante per posizione Trendelenburg

DIMENSIONI

(58.42 cm W x 99.7 cm L)

PESO

(1.04 kg)



I sovramaterassi riscaldanti HotDog sono progettati per fornire un riscaldamento sicuro sotto il paziente (impostazioni 36-40° C). Il tessuto termico è stratificato su schiuma anti-pressione, il che fornisce un cuscinetto a pressione neutro riscaldato uniformemente tra il paziente e la superficie del lettino. Il guscio esterno è in uretano non poroso incorporato con un agente antimicrobico che impedisce la crescita di microrganismi, progettati per una facile pulizia. I materassi hanno una garanzia di 2 anni e una scadenza di 30 mesi.

I materassi sono per lo più radiotrasparenti. Solo le sbarre collettrici lungo il lato lungo, il sensore e i cavi di collegamento sono radiopachi.

Riscaldamento Pediatrico


B270

Fascia Riscaldante per testa pediatrica piccola

per pazienti < 8kg

DIMENSIONI
(11.43 cm W x 33.02 cm L)

PESO
(0.09 kg)

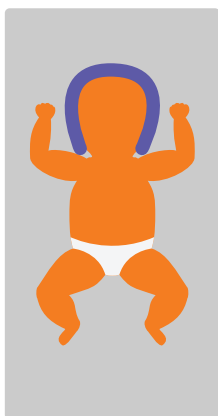


B271

Fascia Riscaldante per testa pediatrica grande

per pazienti > 8kg

DIMENSIONI
(13.34 cm W x 38.74 cm L)

PESO
(0.18 kg)

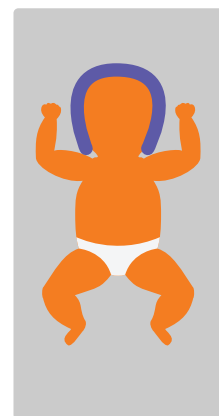


B203

Coperta Riscaldante Pediatrica per la parte inferiore del corpo

DIMENSIONI
(45.72 cm W x 55.88 cm L)

PESO
(0.45 kg)

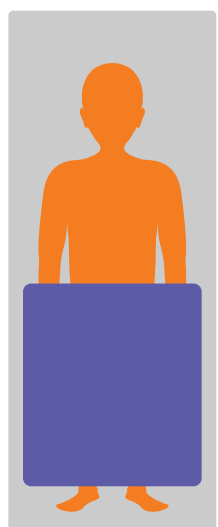

U220

Materasso Riscaldante Sottoscocca pediatrico

per pazienti ≤ 20kg


DIMENSIONI
(44.45 cm W x 73.66 cm L)

PESO
(1.0 kg)



Sistema di posizionamento Wafflegrip per Trendelenburg

- Integrazione tecnologica che ottimizza l'efficienza, la sicurezza e i risultati chirurgici
- Aumenta la superficie di riscaldamento di 3,5 volte per risultati migliori sul paziente
- Protegge il paziente con l'esclusiva tecnologia antiscivolo di WaffleGrip
- Il lenzuolo di scivolamento incorporato consente un posizionamento senza sforzo per migliorare la sicurezza del personale
- Il telo perineale aiuta a gestire i fluidi

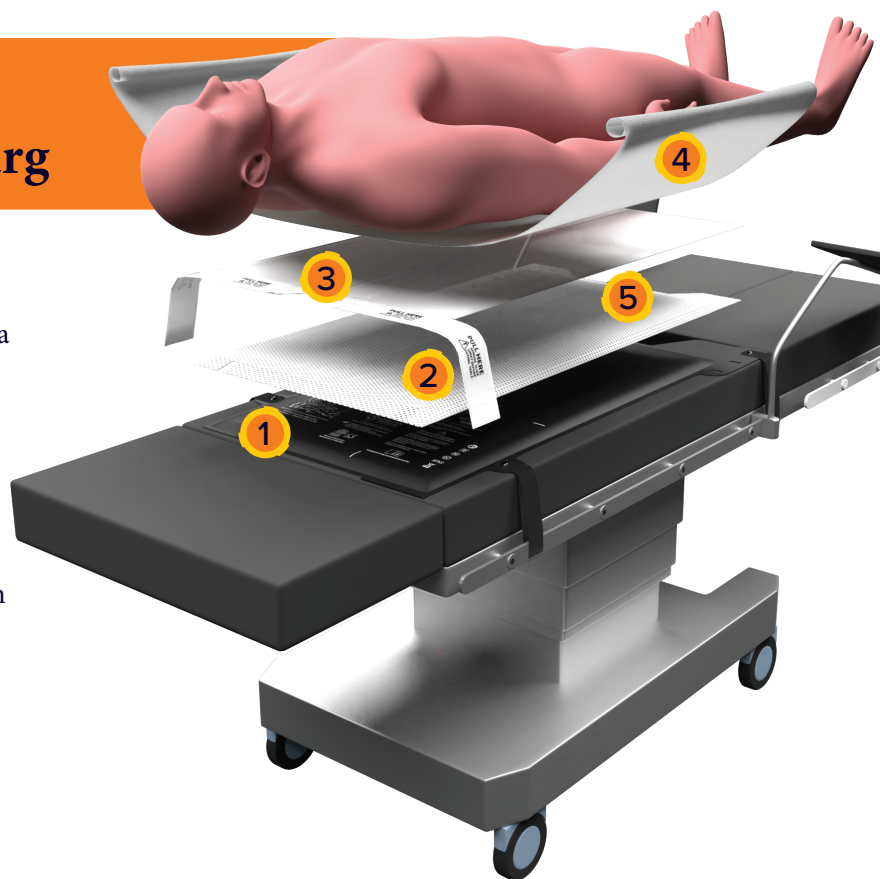

1 U300

Materassino Riscaldante per posizione Trendelenburg

DIMENSIONI
(58.42 cm W x 99.7cm L)

PESO
(1.04 kg)



WaffleGrip deve essere utilizzato con U300.

A301

Kit per posizionamento in posizione Trendelenburg + lenzuolo di scivolamento BackSaver (conf. 10pz)

Ogni kit A301 include:

- 2 Materassino WaffleGrip
 - 3 Lenzuolo di scivolamento BackSaver
 - 4 Lenzuolino con WaffleGrip
 - 5 Telo perineale (nascosto)
- Strap Monouso (non presenti nel disegno)

A101

Cavo coperta
(4.0 m)



A112

Cavo materasso
(5.0 m)



A116

Portarotolo
(include 2 scaffali per lo stoccaggio dei fili)



A108

Scaffale di
stoccaggio cavi -
montaggio a muro




A109

Scaffale di
stoccaggio cavi -
supporto per asta IV



A110

Scaffale di stoccaggio cavi -
montaggio a morsetto
WC7X
(solo per uso con WC7X)

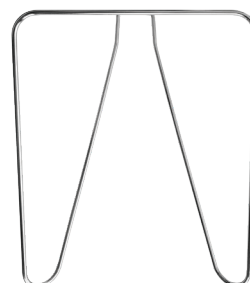

CV10

riscaldatore per gilet
riscaldanti operatori



C21

Gilet riscaldato
(XS-S-M)

C22

Gilet riscaldato
(L-XL-XXL)



C301

kit gilet per operatori
(XS-S-M)
include gilet C21 , riscaldatore CV10

C302

kit gilet per operatori
(L-XL-XXL)
include gilet C22 , riscaldatore CV10



Il sistema di riscaldamento del paziente HotDog è progettato per prevenire e curare l'ipotermia nei pazienti chirurgici. Può essere utilizzato prima, durante e dopo l'intervento. Le complicanze associate all'ipotermia non intenzionale includono un aumento dei tassi di: sanguinamento, infezioni del sito chirurgico, eventi cardiaci avversi e morbidità. Solo RX.

Standard Normativi e di Qualità soddisfatti

FDA 510K autorizzazione per uso adulto e pediatrico
(K052392, K092807, K094056, K112488, K201779)
IEC 80601-2-35 tappetini riscaldanti per uso medico
IEC 60601-1 classe II tipo BF
IEC 60601-1-2 emissioni e radiazioni marchio CE
ISO 13485 registrato
ETL elencato (US & Canada)

Brevetti:

Augustine Surgical Inc. (ASI) e parti correlate hanno ricevuto sedici brevetti dall'Ufficio brevetti degli Stati Uniti contenenti circa 150 rivendicazioni. Sono pendenti altre ventidue domande di brevetto. È stato rilasciato un brevetto PCT. Sono stati rilasciati altri cinque brevetti per soluzioni di sicurezza. ASI ritiene che i brevetti e le applicazioni, coprono ogni modo sicuro ed efficace per utilizzare il tessuto riscaldante flessibile in un ambiente chirurgico. Per ulteriori informazioni sui brevetti, visitare hotdogwarming.com/patents.

A - Air Free assenza di aria

B - Better Warming miglior riscaldamento

C - Cost Effective conveniente



**Augustine
Surgical Inc.**
Making Surgery Safer

6581 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344
phone: +1 952-746-1720
toll free: +1 888-439-2767
email: info@aug surg.com

www.hotdogwarming.com

©2021 Augustine Surgical, Inc.

HotDog is a registered trademark of
Augustine Surgical, Inc.
All Rights Reserved